


Guida per l'Isterectomia Totale per Via Laparoscopica

Manipolatore Uterino ClearView TOTAL



Misurare la profondità dell'Utero e scegliere la misura del Puntale

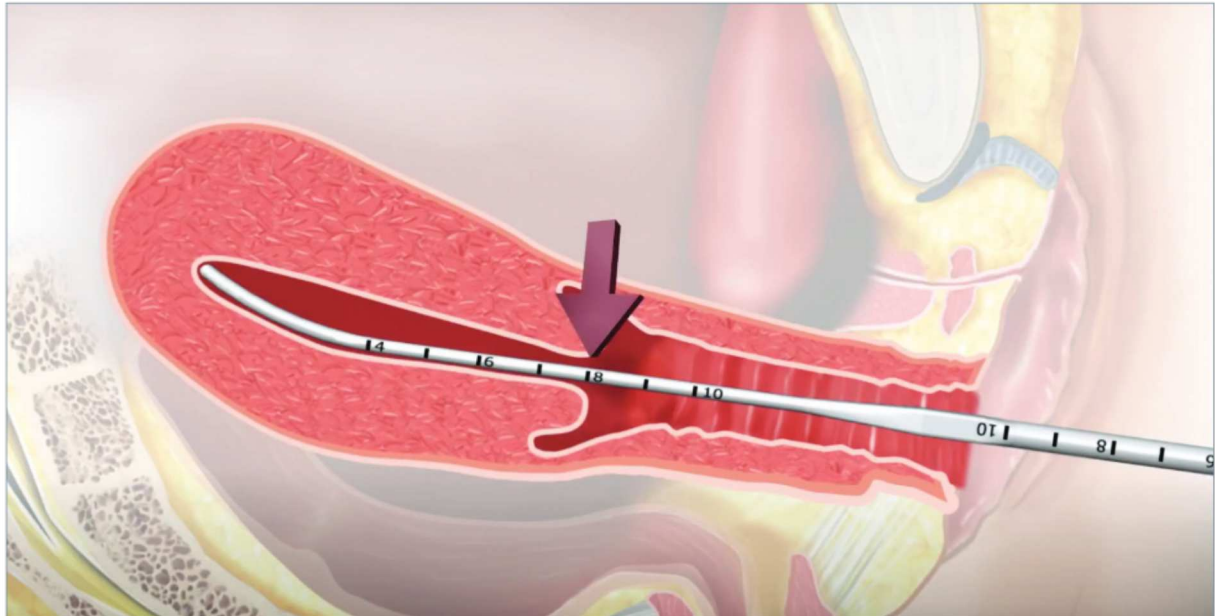

- Misurare la profondità dell'Utero usando l'Isterometro/Dilatatore incluso nella confezione.
- Scegliere la misura di puntale più adatta di ClearView TOTAL (7 cm o 9 cm) considerando che la lunghezza del puntale deve essere almeno 1 cm più corta dell'utero misurato.

Testare Cuffia e Pallone



- Usate la **siringa grande** per gonfiare il palloncino occlusore posto sul corpo del manipolatore (port bianco con scritta "Occluder", con 30/60 cc di soluzione fisiologica sterile.



- Usate la **siringa grande** per gonfiare il palloncino occlusore posto sul corpo del manipolatore (port bianco con scritta "Occluder", con 30/60 cc di soluzione fisiologica sterile.
- Riattaccare le siringhe e sgonfiare i palloni prima di inserire il dispositivo medico nella paziente.
- Riattaccare le siringhe e sgonfiare i palloni prima di inserire il dispositivo medico nella paziente.

Inserire lo Spaziatore "Spacer" (se necessario)



- UM750: Se l'Utero misura 9/10 cm inserire il distanziale da 1 cm.
Se l'Utero misura >10 cm lo spaziatore non è necessario.
- UM950: Se l'Utero misura 9/10 cm inserire il distanziale da 1 cm.
Se l'Utero misura >10 cm lo spaziatore non è necessario.
- Per inserire lo spaziatore, far scorrere il distanziale sul puntale sgonfio fino a toccare la base del puntale. Ruotare in senso orario il distanziale fino a bloccarlo nella sua sede.

Scegliere la Coppetta più Adatta ed inserirla



3 cm




3.5 cm




4 cm

- Scegliere dal vassoio sterile la coppetta per colpotomia più adatta all'anatomia della paziente.

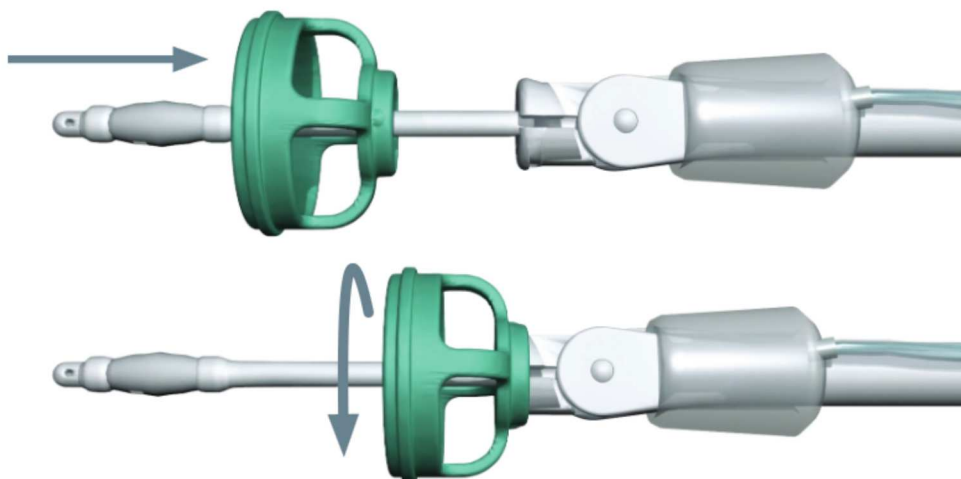


- Fare scorrere con attenzione la coppetta per colpotomia prescelta sul puntale con il palloncino sgonfio fino a toccare la base del puntale o il distanziale (se usato).
- Ruotare in senso orario la coppetta per colpotomia fino a bloccarla nella sua sede.

Per Dilatare la Cervice

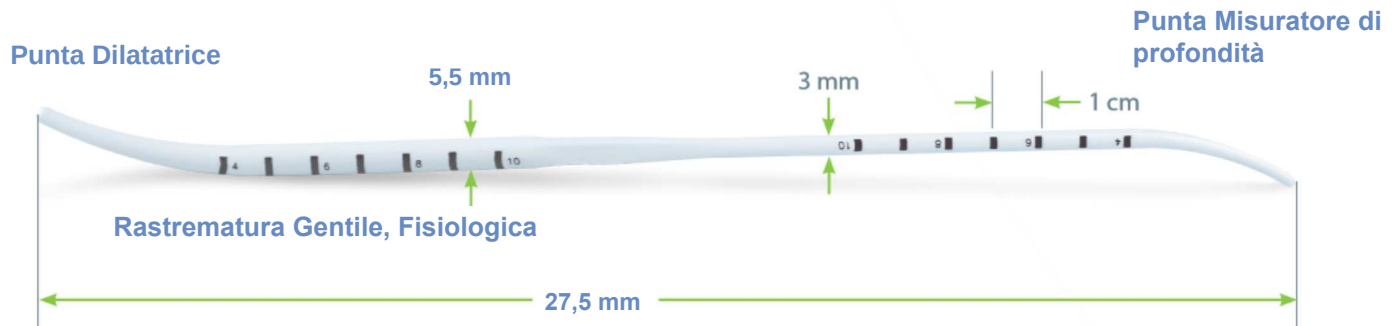

Dilatare la Cervice usando l'Isterometro Dilatatore
incluso nel Kit, oppure con procedura standard.

Lubrificare la punta del dispositivo prima di ins

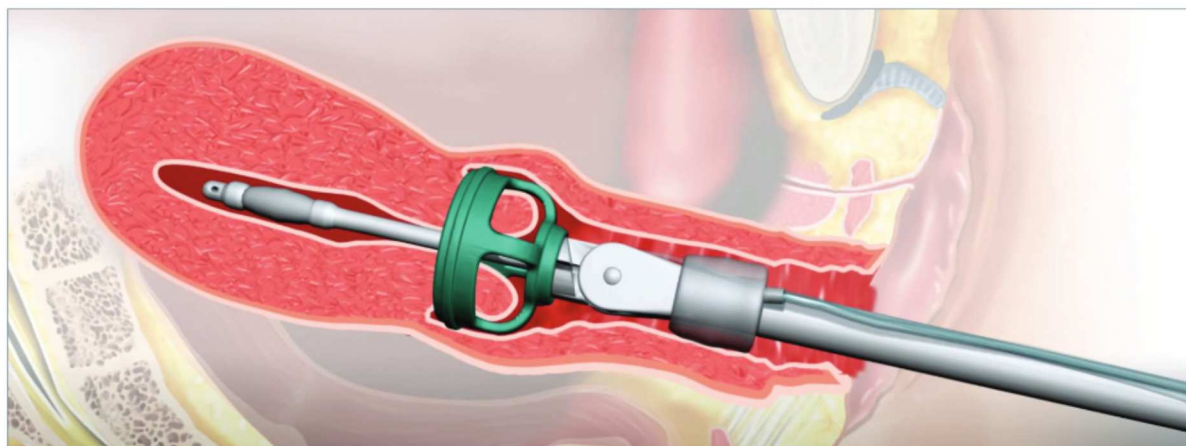


- Lubrificare la punta del dispositivo prima di inserirlo.
- Inserire la punta di ClearView TOTAL nella cervice fino a far alloggiare nella coppetta tutta la portio.

Suggerimenti per l'inserimento


- Per facilitare l'inserimento del DM, ed avere una migliore visibilità ed accessibilità al sito di posizionamento finale delle coppette per la colpotomia possono essere usate normali valve, pinze di Schroeder o pozzi o specula vaginali.
- Per inserire il DM con la tecnica della doppia pinza: afferrare il labbro anteriore della cervice per ottenere una corretta tensione per l'introduzione della punta del manipolatore all'interno dell'ostio cervicale. Inserire un seconda pinza attraverso una delle finestre della coppetta e guidare il DM direttamente attorno alla cervice. Un divaricatore angolato a destra anteriormente ed una valva dotata di peso per divaricare la vagina posteriormente possono facilitare l'inserimento

Gonfiare il palloncino

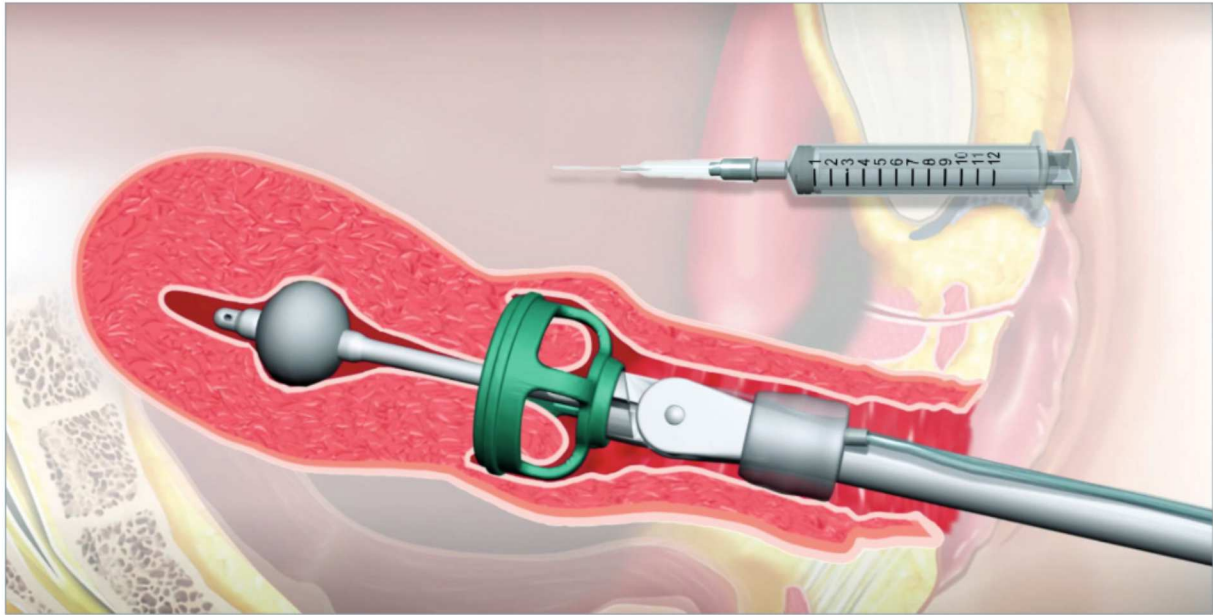

- Usando la siringa piccola gonfiare lentamente con soluzione fisiologica sterile attraverso il port trasparente la cuffia del manipolatore fino a quando la base della coppetta per colpotomia risulta ben adesa alla cervice (max 10 cc).
- Continuare a tenere premuto lo stantuffo della siringa fino a quando la siringa viene rimossa (per evitare il riflusso del liquido nella siringa stessa).
- Trazionare con delicatezza il manipolatore per controllare il corretto posizionamento del palloncino all'interno dell'utero.


Manipolare l'Utero secondo le necessità

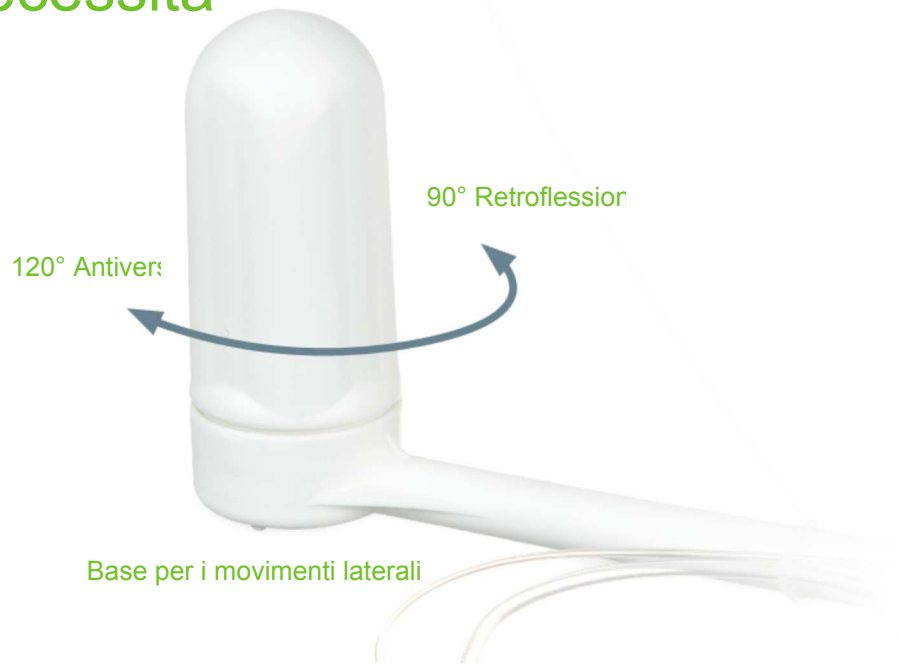

- La rotazione del manipo/impugnatura in senso orario eleva l'utero in posizione antiversa.
- La rotazione del manipo/impugnatura in senso antiorario retroflette l'utero.
- L'utero può essere mosso lateralmente indirizzando il manipo/impugnatura verso sinistra o destra.
- 210° totali di escursione del puntale.



Gonfiare l'Occluder

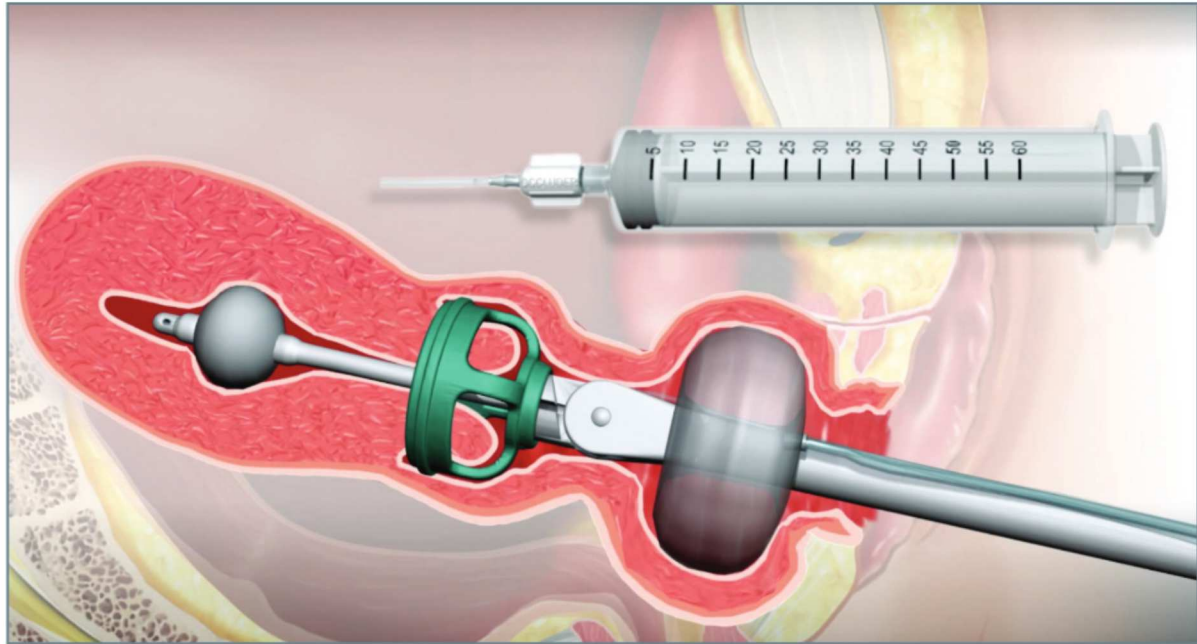

- Poco prima dell'incisione colpotomica assicurarsi che l'occluder sia inserito nella vagina e gonfiato con 60-120 cc di soluzione salina sterile tramite il port bianco etichettato "Occluder"

L'intervento Chirurgico

- Da tenere presente che durante l'intervento la coppetta per colpotomia serve solo come "delineatore di tessuti" e "guida visiva" attorno a cui tagliare, non una guida fisica su cui porre il bisturi.

Dopo aver Terminato la Procedura

- Sgonfiare l'occluder ed il palloncino intrauterino con le siringhe e rimuovere il DM dalla vagina.
- Assicurarsi che il manipolatore sia intatto e completo di ogni parte e di non aver lasciato nessun componente nella paziente.
- Smaltire il manipolatore.



ClearView[®]Total

Uterine Manipulator

Importatore per l'Italia:

∴ B.M. Sanitas Srl

Via Caduti di Cefalonia 90 - 50127 FIRENZE

Tel 055 434421

Fax 055 417621

email commerciale@bmsanitas.it

clinicalinnovations.com

747 West 4170 South | Murray, Utah USA 84123 | P. 801-268-8200 | F. 801-266-7373 | Toll Free: 888-268-6222

LATEX FREE, DEHP FREE | Made in the USA Patents Pending © Copyright 5-2015

© Clinical Innovations, LLC. All rights reserved. P/N 050-0821 Rev. A



**CLINICAL
INNOVATIONS**

for MOM. for BABY. for LIFE.