

AT4

Sistema Tourniquet

Ideale per chirurgia ortopedica mono o bilaterale e per la gestione del dolore



Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema tourniquet AT4

Polcini per tourniquet da sei utilizzati

Polcini tourniquet classici e premier

Copripolsini/fodere e dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca per infusione

Extra opzionali Codici

Riepiлого

Contatti




AneticAid

The Theatre Equipment Specialists

NUOVO


AT4
Electronic
Tourniquet

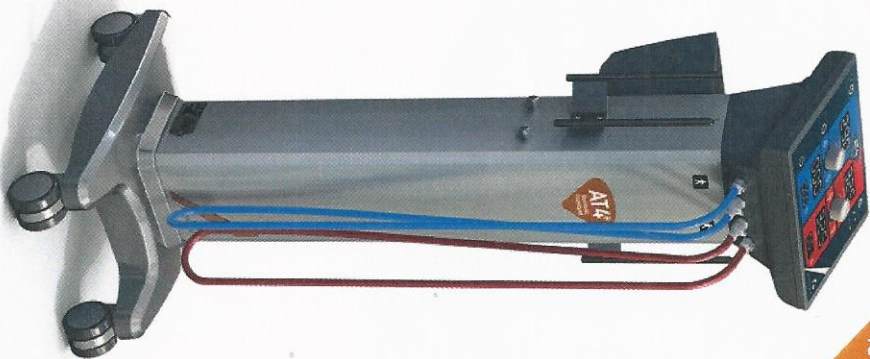

Tourniquet elettronico AT4:

Tourniquet elettronico all'avanguardia a doppio canale con alimentatore integrato, che non richiede alimentazione d'aria compressa esterna ed è dotato di stand mobile e tubi di alimentazione per i polsini.

AT4
Pneumatic
Tourniquet

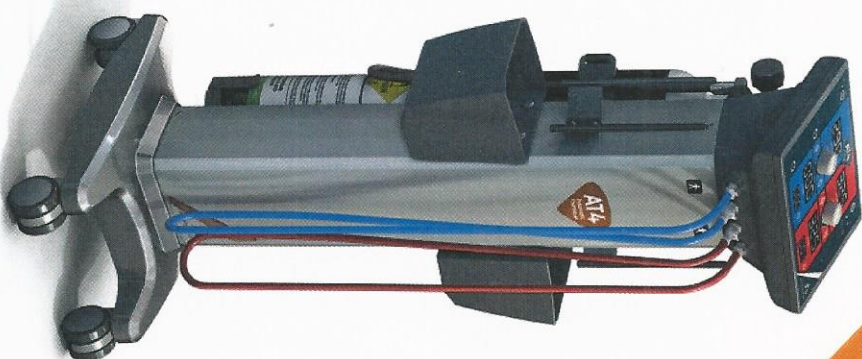

Tourniquet pneumatico AT4:

Tourniquet pneumatico tradizionale a doppio canale funzionante con alimentazione d'aria da 4 o 7 bar dotato di stand mobile e tubi di alimentazione per i polsini.

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema
tourniquet AT4

Polisini per tourniquet
da sei utilizzati

Polisini tourniquet classici
e premier

Copripolisini/fodere e
dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per
l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca
per infusione

Extra opzionali Codici

Riepiлого

Contatti



AneticAid

The Theatre Equipment Specialists

Caratteristiche del Sistema Tourniquet AT4

Display indipendenti
Letture della pressione dei polsini effettiva e pre-selezione

Regolatori con controllo di precisione
Comandi facili da usare

Controlli automatici di autodiagnostica
All'avvio e durante l'uso

IVRA (Blocco di Bier)
Funzione di guida della procedura

Timer LCD automatici
Con allarme tempo trascorso definito dall'utente

Ganci per i polsini
Per comodità di conservazione

Portaoggetti aggiuntivo

Gamma di pressione
0 – 600 mmHg

Avvertenze visive e acustiche
Per batteria, perdite e calibrazione


Pulsanti a pressione
Funzioni gonfia/sgonfia

Facile da pulire
Manutenzione ordinaria

Sistema a doppio canale
Funzionamento a canale singolo o doppio

Tubi a sgancio rapido
Per comodità di conservazione

Canali con codice colore
Dai comandi ai polsini

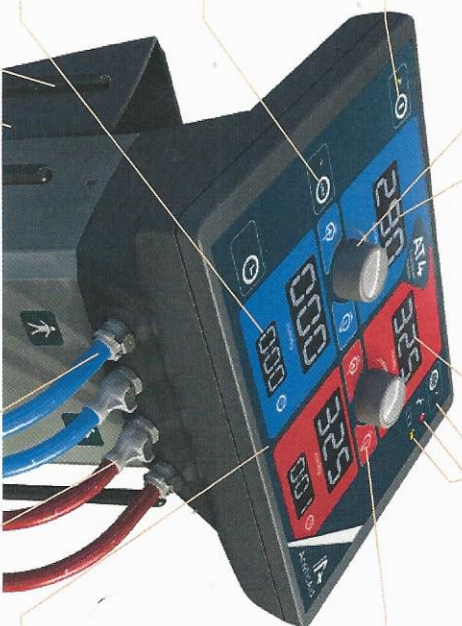

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema tourniquet AT4

Polisini per tourniquet da sei utilizzati

Polisini tourniquet classici e premier

Copripolsini/fodere e dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca per infusione

Extra opzionali Codici

Riepilogo

Contatti



MADE IN THE UK



GLOBAL DISTRIBUTION



QUALITY ASSURED



AneticAid



The Theatre Equipment Specialists

Tecnologia innovativa – applicata alla pratica

Il Sistema Tourniquet AT4 di Anetic Aid è un progetto completamente nuovo intuitivo e facile da usare. La sua struttura compatta è leggera ma robusta, con una tecnologia avanzata che offre massima sicurezza e affidabilità.

Questa versione elettronica funziona con la sua alimentazione d'aria integrata, senza bisogno di una fonte di pressione esterna, e sia questa, sia la versione pneumatica sono dotate di funzione sensibile di compensazione delle perdite nonché controlli di autodiagnostica automatici all'avvio, il che significa che vengono calibrati a ogni accensione.

È stata incorporata un'innovativa funzione di sicurezza aggiuntiva per l'anestesia regionale endovenosa (IVRA) o blocco di Bier che rende impossibile sgonfiare i polsini nell'ordine sbagliato rischiando il rilascio pericoloso di anestetico nel resto del corpo del paziente.

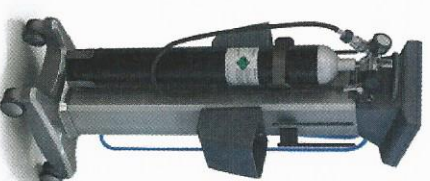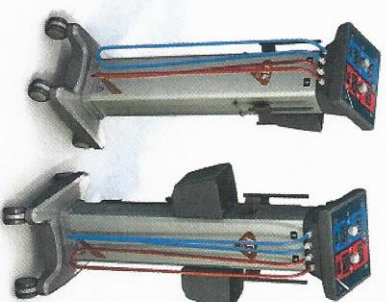

AT4
Electronic
Tourniquet

Tourniquet elettronico AT4:

Tourniquet elettronico all'avanguardia a doppio canale con alimentatore integrato, che non richiede alimentazione d'aria compressa esterna ed è dotato di stand mobile e tubi di alimentazione per i polsini.

Codice: 40080

Tourniquet pneumatico AT4:

Tourniquet pneumatico tradizionale a doppio canale funzionante con alimentazione d'aria da 4 o 7 bar dotato di stand mobile e tubi di alimentazione per i polsini.

Codice: 40070

AT4
Pneumatic
Tourniquet

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema
tourniquet AT4

Polisini per tourniquet
da sei utilizzati

Polisini tourniquet classici
e premier

Copripolisini/fodere e
dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per
l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca
per infusione

Extra opzionali Codici

Riepilogo

Contatti

A
AneticAid
The Theatre Equipment Specialists

Polsini per tourniquet da sei utilizzi

Anetic Aid offre anche una gamma completa di polsini tourniquet e altri accessori

I polsini per tourniquet da sei utilizzi sono l'alternativa ideale ai polsini riutilizzabili, con un minor rischio di infezioni.

Garantiti per sei utilizzi, sono abbastanza economici da poterli utilizzare come polsini monouso. Senza lattice, con un design di basso profilo e sottile, sono disponibili in una gamma di misure con codice colore e in confezioni da 10.



Polsini per tourniquet da sei utilizzi (confezione da 10) – Dritti

- Pediatrici (305 mm x 60 mm) 40285
- Braccio adulto stretto (460 mm x 75 mm) 40288
- Braccio adulto (460 mm x 100 mm) 40290
- Gamba piccola stretto (610 mm x 75 mm) 40292
- Gamba piccola (610 mm x 100 mm) 40293
- Gamba adulto (860 mm x 100 mm) 40295
- Gamba adulto XL (1070 mm x 100 mm) 40296

Polsini per tourniquet da sei utilizzi (confezione da 10) – Conici

- Gamba adulto conica (860 mm x 100 mm) 40297
- Gamba adulto conica XL (1070 mm x 100 mm) 40298

Polsini per tourniquet da sei utilizzi (confezione da 10) – Bambino

- Bambino piccolo (160 mm x 45 mm) 40281
- Bambino medio (230 mm x 45 mm) 40282
- Bambino grande (315 mm x 45 mm) 40283

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema tourniquet AT4

Polsini per tourniquet da sei utilizzi

Polsini tourniquet classici e premier

Copripolsini/fodere e dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per l'alimentazione dell'aria

Toe-riquet™ e premisacca per infusione

Extra opzionali Codici

Riepilogo

Contatti

Polsini per Tourniquet classici e premium

Anetic Aid offre anche una gamma completa di polsini tourniquet e altri accessori

Polsini per tourniquet classici



●	Pediatrici (305 mm x 60 mm)	40700
●	Braccio adulto (460 mm x 100 mm)	40720
●	Braccio adulto stretto (460 mm x 75 mm)	40725
●	Gamba piccola (610 mm x 100 mm)	40740
●	Gamba piccola stretto (610 mm x 75 mm)	40745
●	Gamba adulto (860 mm x 100 mm)	40760
●	Gamba adulto XL (1070 mm x 100 mm)	40770

Polsini per tourniquet classici - Conici

●	Gamba adulto conica (860 mm x 100 mm)	40765
●	Gamba adulto conica XL (1070 mm x 100 mm)	40775

Polsini per tourniquet premier



●	Pediatrici (305 mm x 60 mm)	40200
●	Braccio adulto (460 mm x 100 mm)	40220
●	Braccio adulto stretto (460 mm x 75 mm)	40225
●	Gamba piccola (610 mm x 100 mm)	40240
●	Gamba piccola stretto (610 mm x 75 mm)	40245
●	Gamba adulto (860 mm x 100 mm)	40260
●	Gamba adulto XL (1070 mm x 100 mm)	40270
●	Gamba adulto conica XL (1070 mm x 100 mm)	40278

Polsini per tourniquet premier – Blocco di Bier

●	Pediatrico doppio (305 mm x 120 mm) – Blocco di Bier	40210
●	Braccio adulto doppio (460 mm x 150 mm) – Blocco di Bier	40230
●	Braccio adulto doppio grande (610 mm x 150 mm) – Blocco di Bier	40250

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema tourniquet AT4

Polsini per tourniquet da sei utilizzi

Polsini tourniquet classici e premier

Copripolsini/fodere e dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca per infusione

Extra opzionali Codici

Riepilogo

Contatti

Polsini per tourniquet classici


I polsini per tourniquet classici sono polsini per tourniquet tradizionali riutilizzabili. Design di basso profilo e sottile, materiali senza lattice e studiati per utilizzo a medio termine, disponibili in diverse misure con codice colore.

Polsini per tourniquet premier

I polsini per tourniquet premier sono polsini per tourniquet tradizionali riutilizzabili. Prodotti con materiali forti, senza lattice, facili da pulire con cinghia di sicurezza aggiuntiva per utilizzo a lungo termine, disponibili in diverse misure con codice colore da gambe di bambini a gambe extra-large di adulti.

AT4

Sistema Tourniquet

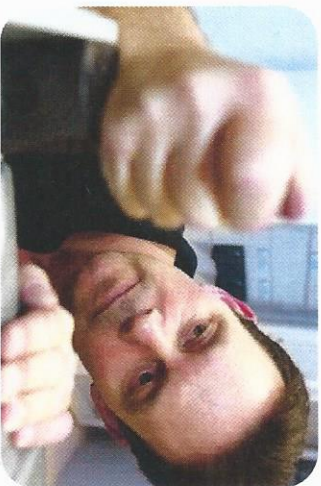

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o contratti di assistenza, contattare il numero:

+44 (0) 1943 878647

sales@aneticaid.com

www.aneticaid.com

SPECIALISING IN:

Patient & Surgery Trolley Systems
Operation Table Accessories
Stainless Steel Theatre Furniture
Surgical Instruments
Electro-Surgical Accessories
Tourniquet Systems
Fibre Optic Instruments
Service & Maintenance

Assistenza e manutenzione

Tutti i prodotti Anetic Aid sono completamente supportati e la nostra politica prevede un lavoro a stretto contatto con i nostri distributori per garantire standard elevati per ogni attrezzatura.

Importatore:

B.M. Sanitas Srl - Firenze

Tel 055 434421

Fax 055 417621

Distributore di zona:

Per dettagli sui distributori locali dei prodotti Anetic Aid, chiamare il +44 (0) 1943 878647



MADE IN THE UK



GLOBAL DISTRIBUTION



QUALITY ASSURED

Anetic Aid Ltd. Queensway, Guiseley, Leeds, West Yorkshire LS20 9JE, UK.

Sistema tourniquet AT4

Introduzione

Panoramica

Caratteristiche del Sistema tourniquet AT4

Polsini per tourniquet da sei utilizzi

Polsini tourniquet classici e premier

Copripolsini/fodere e dispositivi di dissanguamento

Connettori e cavi principali per l'alimentazione dell'aria

Toe-niquet™ e premisacca per infusione

Extra opzionali Codici

Riepilogo

Contatti



AneticAid
The Theatre Equipment Specialists